

MEDIOQ
POWERLASERS

Mediq
LASERS

Q24 Ultra Power Quattro *Dia*

Does it ALL

DE MEEST KRACHTIGE EN VEELZIJDIGE DIODELASER

Voor de ontharings-
en huidprofessional





Krachtig, krachtiger... krachtigst EN veelzijdig: De Mediq Q24 DIA Quattro ultra power diode ICE laser quattro wave gecombineerd met de krachtige Q-switch Yaglaser voor tatoeage verwijdering en 980NM Laser voor couperose behandelingen. Deze ultieme diodelaser gecombineerd met Yaglaser kopstuk geschikt voor ontharing en tatoeage verwijder en huidklinieken werkt op basis van 4 wave 2400 watt krachtige diode golflengten met een machine power van 4800 watt en is hiermee de krachtigste diodelaser in zijn soort en behoort tot de Power diodelasers.

Deze laser is zo krachtig en veelzijdig dat uw u zich direct zult onderscheiden van alle ontharing en overige laserspecialisten in uw regio.

De lasers zijn ontworpen voor haarreductie en ongewenste tatoeages op het gezicht en lichaam, maar het apparaat is veelzijdig met een Q-switch yaglaser en 980NM laser voor nog meer behandel mogelijkheden. De Mediq Q24 quattro DIA werkt efficiënt, geeft nauwelijks ongemak voor uw cliënt en zorgt altijd voor een superieur resultaat op het gebied van ontharen, couperose behandelingen, tatoeage verwijderen, carbon peelingen en kalknagel behandelingen.

Ultra power

De krachtige Mediq Q24 Quattro DIA ICE diode laser heeft een 4 golflengten output van maar liefst 2400 watt output op een oppervlak van maar liefst 15mmx30 mm bij een machine input power van 4800 watt en behoort hiermee tot de Powerlasers. De 24 Duitse laserbars maakt de Q24 Quattro DIA 100% krachtiger dan de Q12, 71,4% krachtiger dan de Mediq Q14 en 2 tot 3 keer zo krachtig als menig ander diodelaser apparaat. Dit betekent dat de energie die uit het handstuk komt krachtig genoeg is om met een klein aantal behandelingen de haargroei met 90% te reduceren. Deze krachtige laser laat andere lasers met vaak niet meer dan 600-720 watt of goedkope lasers met slechts iets hogere machine power dan output power ver achter zich, maar ook krachtige lasers met een kleiner oppervlak van de laser output. Wat betekent dit? Sneller resultaat bij uw klanten, wat resulteert in meer zones die uw klanten willen en betere mond op mond reclame.

Wij adviseren 4 wave toestellen te gebruiken met een output van 1000 watt tot 2400 watt. Bij deze output energie hoort een machine power van minimaal 2800-4800 watt (minimaal het dubbele machine power) zodat de machine de krachtige laser aankan. Hieronder is de energiebundel niet krachtig genoeg voor effectieve ontharing bij iedereen en hierboven is er een aanzienlijk grotere kans op huidschade en is het koelsysteem vaak niet krachtig genoeg om langdurig voldoende koeling te kunnen bieden. Daarnaast is het oppervlak van de laser belangrijk, hoe kleiner het oppervlak, hoe langer een behandeling duurt. Hoe groter, hoe minder krachtig... met uitzondering van de powerlasers, deze zijn met een groot oppervlak nog steeds ongelofelijk krachtig.



Q24 QUATTRO DIA ULTRA POWER

De krachtigste en veelzijdige laser

4 ultrawave /Quattro wave

4 Ultrawave /Quattro wave

Wat zijn de voordelen van 4 ultra krachtige golflengten en waarom zijn traditionele diodelasers daarom verleden tijd: simpel gezegd, de 4 golflengten gecombineerd zorgen voor verschillende lagen energie wat meerdere typen haar vernietigt in één enkele shot. Hierdoor hebben uw klanten sneller en meer resultaat per behandeling vergeleken met traditionele diodelaserapparatuur.

De Quattro UltraWave Diode Laser combineert namelijk de ICE-technologie samen met 4 golflengten voor het mooiste resultaat: we beginnen met de Alexandrite 755nm: om licht en dun haar aan te pakken. Vervolgens de diodelaser 808nm en 940nm: de meest effectieve golflengten voor donker haar. Als laatste de ND:YAG laser 1064nm: voor donker haar en bij donkere huidtypen.



De ALEX 755nm

De Alexandrite golflengte is een bekende in de wereld van de ontharing. Deze golflengte staat bekend om zijn effectieve werking bij licht gekleurde en dunne haartjes. Behandelingen met conventionele Alexandrite lasersystemen zijn echter pijnlijk gebleken. De Triple Wave Diode Laser biedt hier echter een oplossing voor, zodat bijvoorbeeld ook de oppervlakkige kleine blonde haartjes op uw bovenlip of rond uw wenkbrauwen veilig, pijnloos en effectief behandeld kunnen worden met de MagicHead.

De 808nm en 940nm diodelaser

808 nm en 940nm golflengten zijn bekend als diode laserstralen en wordt in de ontharingswereld gezien als de gouden standaard. Met deze golflengte wordt de haarfollikel diep gepenetreerd. In combinatie met een hoog gemiddeld vermogen en een hoge puls frequentie van 10 pulsen per seconde is een comfortabele, effectieve en snelle behandeling mogelijk.

De ND:YAG 1064nm

De YAG is een diodelaser die gebaseerd is op de ND:YAG 1064 golflengte. Deze staat bekend om zijn gematigde melanine absorptie. Hiermee is het uiterst geschikt voor behandeling van de donkere huid. De YAG laser dringt diep door in de haarfollikel waarmee dieper gelegen haren inclusief haarzakje kunnen worden aangepakt. Deze 1064 golflengte is hiermee zeer geschikt voor gebieden als de schaamstreek en oksels. De golflengte zorgt ervoor dat een hogere temperatuur bereikt kan worden omdat een grotere waterabsorptie wordt gegenereerd. Hiermee verbetert de laserbehandeling als geheel en wordt de meest effectieve ontharing bereikt.

POWER EIGENSCHAPPEN



Veilig ontharen met SHR

SHR kenden de meeste mensen al. Deze gepatenteerde techniek is ook weer toegepast in de Triple Wave Diodelaser. De SHR-techniek zorgt enerzijds voor een vrijwel pijnloze behandeling en anderzijds zorgt het voor een veilige behandeling van uw huid. In SHR-modus levert de Quattro Wave diodelaser 10 pulsen per seconde op een laag energieniveau waarmee de haarzakjes langzaam opgewarmd worden; dus geen pijnlijke flitsen meer!

Oudere systemen maken gebruik van pulsen met hoge energie waarmee de huid beschadigd kan worden. Door de combinatie van SHR en het extreem koelende handstuk kunnen ook donkere huidtypen veiliger en effectiever dan ooit behandeld worden. Met de Quattro Wave Diode Laser kunnen we zelfs een zomers gebruinte huid zonder problemen behandelen. Andere technieken zoals IPL, 808nm Diodelasers en ELOS kunnen dit niet.

Magichheads 2.0



Alleen al voor de magicHeads 2.0 kiezen voor de Medioq diodelasers: Magicheads zijn de verwisselbare kristallen verlengstuk van het handstuk. De grote Magichead van 15mm x 30mm van de laserkop is voor het lichaam maar, het tweede Magichead opzetstuk voor het gezicht maar deze is ook weer eenvoudig en snel te om te toveren naar een precisielaser dankzij het mini opzetstuk voor neus en oren. Deze 3 opzetstukken zorgen ervoor dat u snel grote zones kunt behandelen maar ook dat u de lastige maar vaak gewenste kleine zone's zoals de bovenlip (maar ook de dieper gelegen haarwortels in de schaamstreek) met de noodzakelijke chirurgische precisie succesvol kunt uitvoeren.

Diode ICE cooling


-25°

De Ice techniek in het kopstelt voor een ijskoude koeling tot maar liefst minus 25 graden gedurende de behandeling met de Medioq diodelaser. Deze koeling zorgt ervoor dat uw klant nagenoeg pijnloos de krachtige laserstralen zal absorberen zonder hier enig ongemak van te ondervinden. Hoe beter de koeling, hoe sterker u kunt behandelen hoe sneller klanten resultaat zullen boeken.



MAGICHEADS 2.0


Magnetische opzetstukken met een oppervlak van 30mm x 15mm, 15mmx15mm tot een precisie tip... dat werkt.

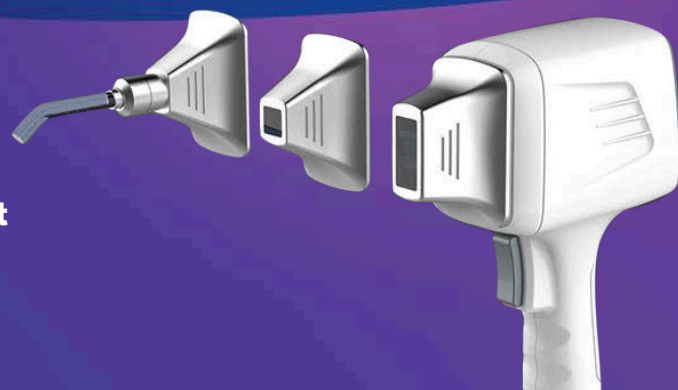

ONDERSCHEIDEN



30mm x 15mm

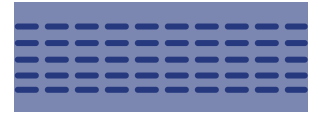

Mega spotsize

Met het grote spotgrote van de Magichead 2.0 van maar liefst 15mm x 30mm weet u zeker dat u de grote lichaamsdelen snel en efficiënt kunt behandelen.

Onderscheiden in de markt

Het zal u niet onbekend zijn dat er veel verschillende diodelaserapparaten beschikbaar zijn op de markt. Hiervan is het overgrote deel totaal niet effectief en er zijn tegenwoordig zelfs goedkope replica toestellen. Maar hoe kunt u zich dan onderscheiden met een goed apparaat? Uw klanten vinden het belangrijk om behandeld te worden met een apparaat, waarmee optimale resultaten behaald worden. Daarnaast willen ze behandeld worden door een deskundige laserspecialist. Op deze punten kunt u zich onderscheiden met de power diodelaser de Q24 Quattro DIA. Een krachtig toestel met een veelzijdig behandelpakket en inhoudelijk theoretische en praktische kennis, inzicht in aanvullende technieken voor een beter resultaat en bewustzijn rondom contra-indicaties, kunnen veel waarde toevoegen voor een klant. Allereerst is het belangrijk om uw klanten de bewezen resultaten te laten zien. Daarnaast kun je als ontharingsspecialist meerwaarde creëren door de klant jouw expertise over de techniek en het apparaat te laten zien. Als deskundig behandelaar zijn klanten in goede handen bij jou en dit moet je laten zien. Uiteraard wil MediqLasers jou helpen – wij hebben veel marketingmaterialen beschikbaar, zodat jij die kunt delen met jouw klanten.

Meer behandelingen: breid uw behandelpakket uit

Uniek: maak uw Q24 Quattro Dia nog multifunctioneler. Voeg extra kopstukken toe aan uw Q24 Dia ultra power Plus diodelaser om zo uw behandelpakket uit te breiden.

- IPL SHR kopstuk voor huidverbetering, acne, vaatafwijkingen: € 3999,- excl. btw.
- RF kopstuk voor huidverbetering € 999,- excl. btw.



DE YAG LASER

Tweede kopstuk: Nd Yag laser voor tatoeage verwijderen

Ongewenste tatoeages en PMU kun je veilig en effectief verwijderen met de grote krachtige Q-Switched ND YAG Laser inbegrepen bij uw Q24 Quattro Dia. De resultaten van het nieuwste Q-Switched ND YAG Laser Tattoo Removal System zijn indrukwekkend. Met de verschillende golflengtes verwijder je elke inktkleur. Door de krachtige lichtintensiteit worden de inktdeeltjes afgebroken, waardoor de inkt verbleekt en een inktloze huid tevoorschijn komt. De Q24 Q-Switched ND YAG Laser van Mediq Laser is daarom de geschikte aanvulling voor in jouw beautyclinic, tattoo shop of PMU-studio.



Q24 Dia Q-switch Yaglaser



COUPEROSE



Derde kopstuk: 980 NM laser voor couperose behandelingen

Couperose is een netwerkje van kleine, rode (soms blauwe) bloedvaatjes op wangen, kin, neus en hals of decolleté. Bij couperose zijn de vaatwandjes verzwakt. Dit kan onder andere gebeuren door veroudering, veel buiten zijn in weer en wind, en blootstelling aan UV-straling. Een 980NM laserbehandeling kan couperose verminderen of zelfs helemaal verhelpen



980 NM laser



SPECIFICATIES Q24 QUATTRO DIA

Golflengte	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm
Spotgrote	15*30mm, 15*15mm, 8mm
Frequency	1-10 HZ
Pulse duur	10-400ms
Laser output	2400 Watt diode powerlaser
Q-switch yaglaser outpower	800 Watt
Machine power	4800 Watt
Energie dichtheid	100-260J/cm ² (24 Duitse laserbars)
Sapphire contact cooling.	- 25 ~ 0°C
Levensduur laser	20-100 miljoen shots (20 miljoen shots garantie) 2 miljoen shots nD Yaglaser
Koelsysteem	Sapphire Crystal + semi conductor + Lucht & water cooling + TEC cooling (Thermo electric koeling) koeling tot minus 25 graden

Medisch CE Goedgekeurd. Ja



MEDIOQ POWERLASERS

QUATTRO *Q24 Dia*

DOES IT ALL



Mediq
LASERS

Mediq
LASERS



MEDIQ
POWERLASERS

Het verschil in diodelaser
ontharingsbehandelingen

www.mediopowerlasers.com



Mediq
LASERS

MEDIQ
POWERLASERS

MEDIQLASERS

Onderdeel van Mediqlasers EUROPE
www.mediqlasers.nl
info@mediqlasers.nl
+3185 004 3979

HET VERSCHIL IN DIODE LASER ONTHAREN

Mediq
LASERS
EUROPE